

Hojenie rán negatívnym tlakom

BIOXA
Therapeutics

Medicína moderných technológií

Podporuje hojenie:

- Udržaním vlhkosti v rane
- Odstraňovaním exudátu a povlaku z rany
- Redukciou intersticiálneho edému
- Minimalizáciou bakteriálneho osídlenia
- Prekrvením
- Stimuláciou buniek
- Proliferáciou fibroblastov
- Granuláciou

Indikácie:³

- Problematické rany
- Akútne rany
- Chronické rany
- Infikované rany
- Rozpadnuté chirurgické rany
- Dekubity II. a III. stupňa
- Syndróm diabetickej nohy
- Ulcus cruris
- Rozostúpené chirurgické rany po zložitých operáciách
- Kožné štepy a transplantáty



Terapia hradená VŠZP*

BIOXA
Therapeutics

Medicína moderných technológií

Bioxa Therapeutics, s. r. o.

Moyzesova 868/67

017 01 Považská Bystrica

info@bioxa.sk

www.bioxa.sk

tel.: 0917 721 816

Hojenie rán negatívnym tlakom

jednoducho, komfortne

XLR8[®]

O 61 % kratšia doba hojenia ako pri štandardnom ošetrovaní rán.²

¹* Genadyne data on file

²* The clinical and cost-effectiveness of externally applied negative pressure wound therapy in the treatment of wounds in home healthcare. (Ostomy Wound Management 1999;45:41-4,46 – 50)

³* Vacuum-Assisted closure for chronic ulcers: why and when is this technique useful? (F. Saucy, E. Allaire, P. Desgranges, C. Haller, H. Probst, J-M. Corpataux, J-P. Becquemin, 2006).

Hojenie rán negatívnym tlakom komplexným systémom XLR8

Pumpa XLR8 malá a výkonná

skutočná veľkosť



- Hmotnosť iba 600 gramov.
- Rozsah 50 – 230 mmHg.
- Kontinuálny aj prerušovaný režim sania.
- Zabudovaná Li-iónová batéria.
- Doba nabíjania 3 hodiny.
- Výdrž minimálne 8 hodín.
- Minimálna hlučnosť.

Bezpečný externý zdroj napätia.

Luer-Lock systém na rýchle a bezpečné pripojenie kanistra.

Jednoduché ovládanie, slovenské menu.

Veľký displej.

Flexibilné výplne rán a systém odvádzania exudátu




Výplne rany


1. Polyuretánová pena.
2. Antimikrobiálna gáza napustená PHMB (Polyhexametyl biguanid).

Systém odvádzania exudátu

1. Unikátny Episil Port
 - atraumatický mäkký silikón redukujúci bolesť pri výmene krytia,
 - integrovaný terčik,
 - vysoký index priepustnosti pár.
2. Vysokosavý silikónový plochý dren.
3. Y-konektor pre spojenie viacerých rán.

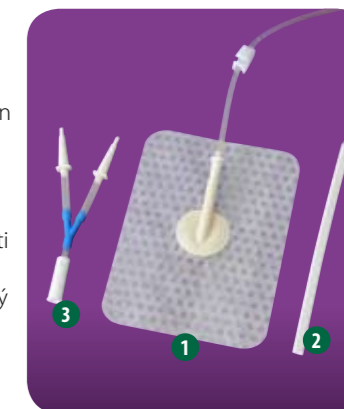

Atraumatický spôsob ochrany rany aj okolia

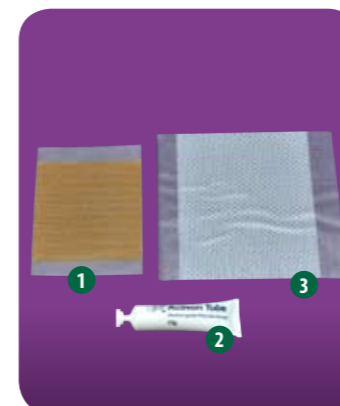

Ochrana lôžka rany

1. Actilite – tenká mriežka napustená antimikrobiálnym medom.
2. Activon Tube - antimikrobiálny med medicínskej kvality.
3. Silflex – atraumatická silikónová mriežka.

Vrchné fixačné krytia

1. Episil
 - atraumatický mäkký silikón,
 - opakovane prílnavý,
 - šetrný k okolitej pokožke.
2. Transparentná krycia fólia XLR8.
3. Transparentná fixačná páska Vellafilm.



Umožňuje maximálnu mobilitu pacienta počas terapie



Zberné kanistre

- 200 ml alebo 400 ml nádoba s absorbentom,
- integrovaný systém odvádzacích hadičiek,
- bezpečný a rýchly Luer-Lock system,
- jednocestný ventil,
- filter na zachytávanie vlhkosti,
- jednorázové použitie.

Príslušenstvo

- neoprénový ochranný obal na pumpu a kanister umožňuje mobilitu pacienta,
- závesný systém na nemocničné lôžko.



Jednoduchšie a komfortnejšie ako si predstavujete.